



# It is time to move forward – damit ist sicherlich die Ergänzung unserer Kollektion Spezialschuhe für Diabetiker gemeint!

Wir stellen Ihnen hier 17 modische Diabetikerschuh-Modelle für Damen vor. 14 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere neue, sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. 3 Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet und eignen sich hervorragend zur Hausschuh-Versorgung. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und zurichtbar. Sie finden in diesem Katalog auch 11 Diabetikerschuh-Modelle für Herren.

10 Modelle aus unserer Damen-Kollektion und 7 Modelle aus unserer Herren-Kollektion sind in 2 Weiten ab Lager sofort lieferbar! Ab Januar 2020 sind auch Modelle in 3 Weiten lieferbar – auch diesen finden Sie in diese Katalog.

- Alle Schuhe aus diesem Katalog sind mit unserem "Xsensible-Inside Stretchleder Technologie" ausgerüstet und sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- "Xsensible-Inside Stretchleder" hat die besondere Eigenschaft das dieses Material atmungsaktiv ist und sorgt für ein optimales Fuß Klima.

Alle Modelle sind auch in 1/2 Größen ab Lager sofort lieferbar.

# Spezialschuhe für Diabetiker

**GKV-Abrechnungsfähig mit der Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010**Die Hilfsmittelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.Nr: 31.03.08.0010 hat **nur Gültigkeit in Verbindung** mit unseren modularen Sohlenversteifung Art. 91114 und 91115.

#### 7006 SHARON LACE

K = NORMAL





ART. 70060.2.825 Pasmina Kroko Leder mit Stretchsilky-Leder Weiten: K/M (*Lieferbar ab Feb./2020*)





ART. 70060.3.155 Weiss / Reptile Leder mit weissem Stretchleder Weite: K (*Lieferbar ab Feb.*/2020)





ART. 70060.2.249 Dunkelblau Nubuk / Silver Leder mit blau Stretchsilky-Leder Weite: K/M (*Lieferbar ab Feb.*/2020)





## 7004 ILSE LACE

K = NORMAL M = WEIT



Art. 70054.3.001 Schwarz Fantasy Wildleder mit schwarzem Stretchleder Weite: K



Art. 70054.2.801 Grau Fantasy Wildleder mit grau Stretchsilky-Leder Weiten: K/M



#### 7006 IRMA LACE

K = NORMAL M = WEIT



ART. 70056.2.430 Sand Nubuk/Leder mit Sand Stretchsilky-Leder Weiten: K/M



ART. 70056.4.001 Schwarz Leder/Nubuk mit schwarzem Stretchnubuk Weiten: K/M



ART. 70056.3.101 Weiss /Silver Leder mit weissem Stretchleder Weite: K



#### 7102 ILKE VELCRO

K = NORMAM = WEITO = 17MM



ART. 70057.2.430 Sand Leder mit Sand Stretchsilky-Leder Weite: K



ART. 70057.2.417 Taupe Fantasy Leder mit Stretchsilky-Leder Weiten: K/M



ART. 70057.2.001 Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder Weiten: K/M/O

Weite O: Das Raumwunder! Für Diabetes Adaptierte Fußbettungen bis 17mm Starke Ab Januar 2020 als Sonderanfertigung lieferbar.



## 7000 INGRID VELCRO

K = NORMAL
M = WEIT



ART. 70053.2.001

Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky- Leder

Laufsohle: PU Sport Weiten: K/M





ART. 70053.2.830

Anthrazit (grau) Leder mit anthrazit Stretchsilky-Leder

Laufsohle: EVA Leichtgewicht

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH ½ GRÖSSEN LEISTEN: NN180K LAUFSOHLE: EVA LEICHTGEWICHT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 31

#### 7102 POLISH VELCRO

K = NORMAL





ART. 70037.4.001

Schwarz Leder mit schwarzem Stretchnubuk

Weite: K





ART. 70037.4.501

Taupe Leder mit taupe Stretchnubuk

Weite: K

## 7203 CLAUDIA LACE (MIT REIBVERSCHLUSS)

K = NORMAL





ART. 70055.2.001 Schwarz Nubuk mit schwarzem Stretchsilky-Leder Weiten: K/M

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN LEISTEN: N180K LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

#### 7201 ISA



ART. 70059.2.002 Schwarz Fantasy Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder Weite: K







GRÖßEN: 6-12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN

LEISTEN: N39K

LAUFSOHLE: SPORTLICHE LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

## **7504 SAN FRANCISCO**

K = NORMAL



ART. 70206.3.331

Braun (Cognac) mit blau Leder und braun Stretchleder

Weite: K

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN LEISTEN: N39K / N39M LAUFSOHLE: SPORTLICHE LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

> K = NORMALM = WEIT



ART. 70206.2.227 Dunkelblau Nubuk mit schwarzem Leder und

Stretchsilky-Leder in blau



GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN
LEISTEN: N39K/N39M
LAUFSOHLE: SPORTLICHE LEICHTGEWICHT EVALAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

## 7700 BRAVE LACE

K = NORMAL
M = WEIT



ART. 70207.2.815

Grau Nubuk mit Stretchsilky-Leder in grau.

Weiten: K/M

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN LEISTEN: N39K/N39M LAUFSOHLE: SPORTLICHE LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

#### 7700 BRAVE VELCRO

K = NORMAL M = WEIT



ART. 70208.2.001

Schwarz Nubuk mit schwarzem Stretchsilky-Leder



GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN
LEISTEN: N39K
LAUFSOHLE: SPORTLICHE LEICHTGEWICHT EVALAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

## 7701 CHALLENGER (MIT REIBVERSCHLUSS)

K = NORMAL





Dunkelblau Nubuk mit grau Nubuk und Stretchsilky-Leder in blau Weite: K



GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN LEISTEN: N39K LAUFSOHLE: SPORTLICHE LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

# 7701 TRAVELLER LACE (MIT REIßVERSCHLUSS)

K = NORMAL







ART. 70209.2.001 Schwarz Nubuk/Leder mit schwarz Stretchsilky-Leder Weite: K



GRÖßEN: 6 − 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN LEISTEN: N39K/N39M /N39O LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

#### 7503 SAILOR VELCRO

K = NORMAM = WEITO = 17MM



ART. 70201.2.301

Braun Leder mit braun Stretchsilky-Leder

Weiten: K/M/O

Weite O: Das Raumwunder! Für Diabetes Adaptierte Fußbettungen bis 17mm Starke Ab Januar 2020 als Sonderanfertigung lieferbar.

GRÖßEN: 6 − 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN LEISTEN: N39K/N39M LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 31

#### 7503 SAILOR LACE

K = NORMAL M = WEIT



ART. 70200.2.801

Grau Leder mit grau Stretchsilky-Leder



# 7501 ORLANDO LACE / VELCRO

K = NORMAL
M = WEIT



ART. 70202.3.001 Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder Weiten: K/M



ART. 70203.3.001 Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder Weiten: K/M

# 7602 OLAV VELCRO

M = WEIT



ART. 70204.3.001 Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder Weite: M



# **FERTIGUNGSANWEISUNG**

für den Einbau der VIPREX®- Sohlenversteifung in die NIMCO Diabetiker-Schuhe

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte. Die Anweisung ist notwendig, um die Anforderungen an die - nach DDG definierte Schuhversorgung für Diabetiker - zu erfüllen.

**Materialkomponenten:** Glasfaser-Polypropylen

Verwendeter Kleber: Neoprenkleber

#### **ARBEITSSCHRITTE:**

Entfernen Sie die Schnürriemen und die innenliegenden Platzhalter.



Streichen Sie die Brandsohlenbeschichtung erstmalig mit Kleber ein. Die Brandsohlenbeschichtung besteht aus einem Spezialgewirk, welches nach Abschluss des Klebevorgangs eine unlösbare Verbindung ergibt.



Wählen Sie für die gewünschte
Versteifungsintensität die passende VIPREX®Sohle aus und passen Sie diese auf den Umriss an.
(Siehe Hilfslinien!) Rauen Sie die Unterseite an und streichen Sie die aufgeraute Seite mit Kleber ein.





Streichen Sie das Brandsohlengewirk zum zweiten Mal ein. Gut ablüften lassen!



Erhitzen Sie das Versteifungselement **mittig (siehe Bild!**) bei ca. 200 Grad mit dem Heißluftfön.

Hinweis: Nicht im Bereich der ausgedünnten Ränder erhitzen!



Setzen Sie das erhitzte Modul in den Schuh ein.



Anschließend zügig den Pressvorgang einleiten - entweder mittels Leisten oder Sohlenpresse.





8 Mit Hilfe unserer (optional erhältlichen)
Brandsohlenschablonen passen Sie die individuelle
Bettung an.



9 Fertig zur Anprobe / Pedographie.



Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Anwendungstechniker, Herr Ulrich Werle, gerne auch telefonisch unter (01 70) 2 82 33 28 zur Verfügung.

#### ERHÄLTLICHE AUSFÜHRUNGEN:

SOHLENVERSTEIFUNG DAMEN - ARTIKEL 91114

**Größe I**, für: 4,5 / 4 / 3,5 / 3

**Größe II**, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5

Größe III, für: 9 / 8,5 / 8

**SOHLENVERSTEIFUNG HERREN - ARTIKEL 91115** 

Größe I, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6

**Größe II**, für 10,5 / 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8

Größe III, für 12 / 11,5 / 11

**Tipp:** Die Sohlenversteifungen für Herren können auch in den Damenmodellen eingesetzt werden, wenn eine stärkere Versteifung erzielt werden soll.

Sicherheitshinweis: Die VIPREX®-Sohlenversteifung ist konform den Anforderungen des MPG. Sie enthält Glasfasern, um eine hohe Stabilität zu erzielen. Das Element wurde im Materialmix so konzipiert, dass beim Schleifvorgang das verschmelzende Polypropylen die austretenden Glasfasern aufnimmt und einbindet. Trotzdem kann es nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glasfasern in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Bitte tragen Sie bei der Verarbeitung deshalb Schutzausrüstung in Form von Atem- und Augenschutz.

#### MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN N180K

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
31/2	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
41/2	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
51/2	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
61/2	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
71/2	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
81/2	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

#### MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN N180M

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
31/2	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
41/2	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
51/2	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
61/2	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
71/2	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
81/2	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

#### MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN N39K


Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
61/2	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
71/2	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
81/2	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
91/2	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
101/2	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11	304,9	109,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
111/2	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.


#### MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN N39M

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

#### Massangaben sind netto - ohne Einlagenstärke!

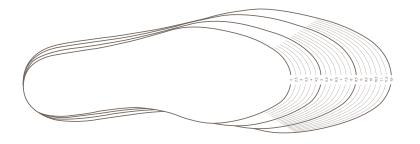

- Länge der Brandsohle
- 2 Breite am Ballen
- 3 Ballenmaß
- 4 Spannmaß
- 5 Fersenmaß
- 5 Fersenmaß6 Zehenhöhe
- 7 Fersensprengung
- 8 Zehensprengung

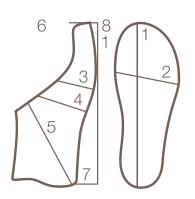





#### WWW.NM<sub>4</sub>Y.COM

Kundenservice +31 (0)24 684 80 90 sales@nm4y.com

#### Nimco Made4You, B.V.

Oude Kleefsebaan, 119 6572 AK Berg en Dal | The Netherlands Tel.: +31 (0)24 684 80 90 sales@nm4y.com

Warenretouren melden Sie bitte bei unserem Kundenservice an – wir veranlassen die Abholung und weitere Bearbeitung.

#### Medizinproduktberater:

Herr O.J.A. Toornend (OSM) Herr F.H.T. Kruitwagen Email: f.kruitwagen@nm4y.com

NM4Y is a registred trademark. © All rights reserved